

*Podiatry Chair*

Designed By ARCHIMED

**AVANGARDE**

PODIATRY CHAIR



ARCHIMED®  
[www.arsimed.com.tr](http://www.arsimed.com.tr)



*Podiatry*

*Designed By Archimed*



Designed By ARCHIMED

**AVANGARDE**

PODIATRY CHAIR



## PC 03 - S Archimed Avangarde Podoloji Koltuğu (3 Motorlu)

Podoloji Koltuğu, sırt, oturak, ve ayak bölümleri olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. 3 adet DC motor sayesinde el kumandasından kontrol edilerek sırt, yükseklik ve trendelenburg/ters trendelenburg hareketleri yapılabilir. Yukarı/aşağı yükseklik ayarı özel bir yataklama sistemi sayesinde dikey olarak yapılmakta, bu yüzden de koltuk yükselirken herhangi bir pozisyon değişikliği olmamaktadır. Özel vinleks malzemeye kaplanmış olan döşeme uzun ömürlü, kolay temizlenebilir, su geçirmez ve anti-bakteriyel özelliğindedir. Koltuk dışındaki abs kaplamalar döşemenin içinde kalacak şekilde dizayn edilmiş olup ve döşeme ve plastik arasına kir vs girmesine engel olmaktadır. Çelik konstrüksiyon galvaniz kaplama ve elektrostatik toz boya ile korozyona karşı korumaya alınmış ve tamamı anti-bakteriyel özelliğe sahip kolay temizlenebilir ABS plastiklerle kaplatılmıştır. Böylece çok şık bir görünüme ve sağlamlığa sahiptir. Kollar sırt hareketinde sırtla birlikte yerden paralellik bozulmadan hareket eder ve isteğe bağlı olarak kolaylıkla sökülüp takılabilir. Ayak kısmı iki parçadan oluşmaktadır ve her bir ayak parçası istenilen noktada özel bir sistem sayesinde manuel olarak sabitlenebilir. Ayrıca ayak uzatma parçaları da uzatılarak istenilen noktada sabitlenebilir. Ayak uzatma parçası sökülüp takılabilir.



Designed by ARCHIMED  
**AVANGARDE**  
PODIATRY CHAIR



Sökülüp takılabilir ve istenilen seviyede ayarlanabilir baş kısmı  
Removable and adjustable head rest



Sırt hareketi / Back rest movement

Sökülüp takılabilen kolçaklar  
Removable armrests



Sökülüp takılabilir ve istenilen seviyede ayarlanabilir ayak uzatma  
Removable and adjustable foot extension



Ayak hareketi / Leg rest movement

## PC 03 -S Archimed Avangarde Podiatry Chair (3 Motors)

Archimed Podiatry Chair consists of 3 main parts. Back rest, seat part and leg rest. The chair makes back up&down, chair up&down and trendelenburg&reverse trendelenburg movements by 4 DC motors with using handset. Height can be adjusted by handset. It moves up&down vertically. Chair is covered with cleanable, waterproof material and the chair is comfortable and orthopedically designed. Cushion has a suitable hardness and upholstery made of leatherette which is easy cleanable and harmless to skin. Steel construction is painted with electrostatic powder coating and protected with galvanize against corrosion. And the construction is covered with anti-bacterial and easy cleanable ABS plastic. So that, the chairs seems more aesthetically. ABS covering designed to keep itself in the upholstery and it blocks the dust which may go into the upholstery. When back rest moves, arm rests move together with the back rest and during this movement armrests stay parallel to the ground. The arm rests are easily removable. Foot rest is consists of 2 pieces and both of these pieces can move seperately (manual). Easy removable and renewable foot extension is included to the chair.



Trendelenburg hareketi / Trendelenburg movement



Koltuğun yükseklik hareketi / Chair up&down movement

## Renkler



No:1 Beyaz / White



No:2 Krem / Beige



No:3 Sötük Kahve / Milky Brown



No:4 Koyu Kahve / Dark Brown



No:5 Fıstık Yeşili / Pistachio Green



No:6 Açık Yeşil / Light Green



No:7 Sarı / Yellow



No:8 Turuncu / Orange



No:9 Bordo / Claret Red



No:10 Pembe / Pink



No:11 Lila / Lilac



No:12 Açık Mavi / Light Blue



No:13 Lacivert / Navy Blue



No:14 Gri / Gray





No:15 Koyu Yeşil / Dark Green



No:16 Siyah / Black

## Teknik Özellikler Technical Specifications

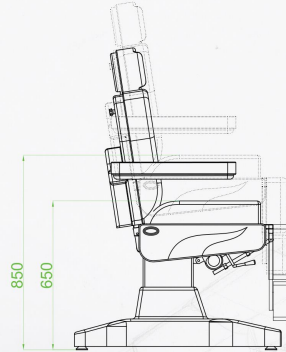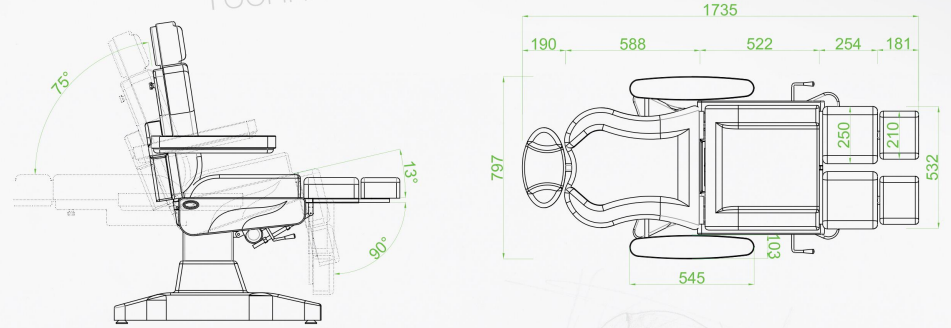

ÖZELLİKLER / FEATURES	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	
KOMPLE UZUNLUK / FULL LENGTH	1735 mm	68.30 inch
EN / WIDTH	545 mm	21.45 inch
KOÇLAK EN / WIDTH WITH ARMRESTS	797 mm	31.37 inch
MAX. YÜKSEKLİK / MAX. HEIGHT	850 mm	33.50 inch
SIRT EN / BACKREST WIDTH	522 mm	20.55 inch
SIRT UZUNLUK / BACKREST LENGTH	181 mm	7.13 inch
OTURAK EN / SEAT WIDTH	588 mm	23.15 inch
OTURAK UZUNLUK / SEAT LENGTH	522 mm	20.55 inch
AYAK EN / FOOTREST WIDTH	250 mm	9.84 inch
AYAK UZUNLUK / FOOTREST LENGTH	240 mm	9.44 inch
KOÇLAK UZUNLUK / ARMREST LENGTH	190 mm	7.48 inch
KOÇLAK EN / ARMREST WIDTH	103 mm	4.05 inch
SIRT AÇISI / BACK ANGLE		75°
AYAK AÇISI / FOOT ANGLE		90°
TİLEK TRENDİLENİMLERİ / TRENDELING		13°
TİLEK TRENDİLENİMLERİ / HEADREST TRENDELING		0°
KOÇLAK EN / ARMREST WIDTH	190 mm	7.48 inch
KOÇLAK UZUNLUK / ARMREST LENGTH	250 mm	9.84 inch
AYAK UZUNLUK EN / FOOTREST LENGTH	240 mm	9.44 inch
AYAK UZUNLUK EN / FOOTREST LENGTH	170 mm	6.69 inch
SÖNÜCME ÖZELLİKLERİ / SOAK DENSITY		30
DÖŞEME ÖZELLİKLERİ / UPHOLSTERY FEATURE		SUNİ DERİ / LEATHERETTE
TAŞIMA KAPASİTESİ / MAX. SAFE LOAD CAPACITY	150 kg	330.83 Pound
GRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	105 kg	231.48 Pound

# Podiatry Chair

Designed By ARCHIMED

## AVANGARDE

PODIATRY CHAIR



Podiatry



Arşimed Medikal Kozm. San. Tic Ltd. Şti.

Mimar Sinan Mah. Bosna Cd. No:5 / 3 Çekmeköy - İstanbul

☎ : +90 216 567 8 567 (pbx) 📠 : +90 216 567 8 367 (pbx)

🌐 : www.arsimed.com.tr 📧 : info@arsimed.com.tr

CE

FDA

EN 60601-1

EN 60601-2



ISO13485  
certified

ARCHIMED®  
www.arsimed.com.tr