

PANAMERA

DIALYSIS AND CHEMOTHERAPY CHAIR Designed By ARCHIMED



NURSE
PROCESS
WATER
PERITONEAL
RENAL
GLYCOL
HAIR
CELL
CANCER
CYTOTOXIC
LIVING
ENERGY
ENDOCRINE
EXCESS

PANAMERA
DIALYSIS AND CHEMOTHERAPY CHAIR Designed by ARCHIMED

CHEMOTHERAPY

TRENDELENBURG

MEDICAL

CERATININE

MANNITOL

SIDE

LIFESTYLE

ONCOLOGY

WEEK

BICARBONATE

POSITIVE

TUMOR

HAPPY

INDICATIONS

DOCTOR

TRANSPLANT

GENETIC

LIFE

HEALTH

PATIENT

WELLNESS

ABDOMINAL

NEFROLOGY

SIMILAR

DIALYSIS

BLOOD

DIFUSSION

FLOW

MACHINE

CHAIR

FLUID

CARE

EXTRACORPOREAL

BODY



Designed By ArchiMed

DC 04 - S Archimed Panamera Diyaliz ve Kemoterapi Koltuğu (4 Motorlu)

PANAMERA
DIALYSIS AND CHEMOTHERAPY CHAIR Designed By ARCHIMED

Diyaliz koltuğu, sırt, oturak ve ayak kısmı olmak üzere 3 ana parçadan oluşmaktadır. El kumandası ile komut verilen 4 Adet DC motor ile sırt aşağı/yukarı, yükseklik ayarı, ayak parçası aşağı/yukarı ve trendelenburg/ters trendelenburg hareketlerini yapabile kabiliyetine sahiptir. Sökülüp takılabilir ve istenilen seviyede ayarlanabilir kramp basamağı ve baş kısmı mevcuttur. Kramp basamağı diyaliz esnasında oluşan krampları engellemek için 10 cm. ye kadar içeri çekilerek hasta boyuna göre ayarlanabilmektedir. Başlık hastanın boyuna göre ayarlanabilir. Koltuk ile birlikte ense yastığı verilmektedir. Böylece hasta konforu ön planda tutulmuştur. Koltuk leke bırakmadan silinebilen, sıvı emmeyen materyalle kaplı, kolay temizlenebilir, hijyenik, uzun oturumlarda terleme ve kaşıntıya sebep olmayacak, kolay yanmayacak özellikte suni deriden yapılmıştır. Döşemelerde kullanılan sünger visko-elastik özellikte olup hastanın baskı yükünü geniş alana yayarak vücudun şeklini alacak şekilde tasarlanmış ve mikro kan dolaşımını engellemeyecek yapıdadır. Koltuk dışındaki abs kaplamalar döşemenin içinde kalacak şekilde dizayn edilmiş olup ve döşeme ve plastik arasında kir vs girmesine engel olmaktadır. Kol kısımları istenilen yönde ayarlanabilmektedir, koltuğun sırt kısmının hareketleri ile doğru oranda hareket ederek yere olan paralellliğini bozmamaktadır. Cihazın ana gövdesi (şase) devrilmeye karşı güvenli imal edilmiştir. Şase ana taşıyıcı iskeleti 14 mm. sacdan imal edilmiştir ve lifting sistemi 20 mm çelik lama taşıyıcı üzerine monte edilmiştir. Panamera Diyaliz koltuğu, diyaliz, onkoloji, kemoterapi, rehabilitasyon, kan alma ve plazmaferez tedavi işlemlerinde kullanılabilmektedir. Opsiyonel olarak tv, yemek sehpası ve serum askısı bağlanabilmektedir. 4 adet kilitlenebilir tekerler sayesinde istenilen yerde sabitlenebilmekte ve kolay taşınabilmektedir. Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir.



DC 04 -S Archimed Panamera Dialysis and Chemotherapy Chair (4 Motors)

Archimed Panamera Dialysis Chair is designed for dialysis, oncology, chemotherapy, apheresis, rehabilitation, plasmapheresis and blood transfusion. The chair consists of 3 main parts. Back rest, seat part and leg rest. The chair makes back up&down, chair up&down, leg rest up&down and trendelenburg&reverse trendelenburg movements by 4 DC motors with using handset. Height can be adjusted by handset. It moves up&down vertically. There is a removable cramp support and a removable head part on the table. Cramp support can be adjusted according to the patient's height to prevent cramps which may happen during the dialysis processes. Head part can be adjusted according to the patient's height, as well. Neck Cushion is given with the chair. Chair is covered with cleanable, waterproof material and the chair is comfortable and orthopedically designed. Cushion is at appropriate hardness and upholstery made of leatherette which is easy cleanable and harmless to skin. The chair is made of viscoelastic foam. Viscoelastic foam, also known as memory foam, is a type of open cell, flexible polyurethane foam. It has a sensitive structure to body heat and weight. It contours to the body shape, distributes the body pressure over a wide area and besides comfortable seating, allows efficient blood circulation. The patient can also benefit from the foam's capacity to redistribute weight and surface pressure, potentially reducing decubitus ulcers (bed sores) caused by aggravated pressure between the skin and bony areas of the body. ABS covering designed to keep itself in the upholstery and it blocks the dust which may go into the upholstery. When back rest moves, arm rests move together with the back rest and during this movement armrests stay parallel to the ground. And the arm rests are easily removable. Chassis is made of 14 mm. sheet metal and lifting system fixed onto the 20 mm. steel llama holder. IV Pole is the standard accessory of the chair, whereas TV and dining table are optional accessories that can be added to the chair according to your choice. 4 lockable castors fix the chair to the floor.

Koltuğun yükseklik hareketi / Chair up&down movement

Renk Alternatifleri



No:1 Beyaz / White



No:2 Krem / Beige



No:3 Sötlü Kahve / Milky Brown



No:4 Koyu Kahve / Dark Brown



No:5 Fıstık Yeşili / Pistachio Green



No:6 Açık Yeşil / Light Green



No:7 Sarı / Yellow



No:8 Turuncu / Orange



No:9 Bordo / Claret Red



No:10 Pembe / Pink



No:11 Lila / Lilac



No:12 Açık Mavi / Light Blue



No:13 Lacivert / Navy Blue



No:14 Gri / Gray






No:15 Koyu Yeşil / Dark Green



No:16 Siyah / Black

Teknik Özellikler

Technical Specifications

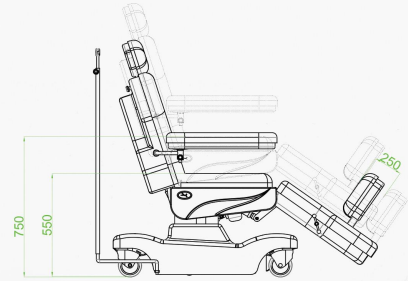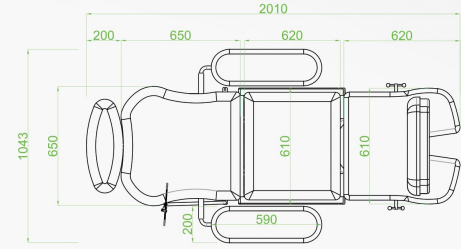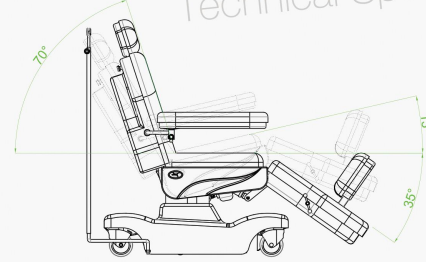

ÖZELLİKLER / FEATURES	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	
KOMPLE UZUNLUK / FULL LENGTH	2010 mm	79.13 Inch
EN / WIDTH	625 mm	24.6 Inch
KOLÇAKLI EN / WIDTH WITH ARMRESTS	1090 mm	41.33 Inch
MIN. YÜKSEKLİK / MIN. HEIGHT	550 mm	21.65 Inch
MAX. YÜKSEKLİK / MAX. HEIGHT	750 mm	29.52 Inch
SIRT EN / BACKREST WIDTH	650 mm	25.59 Inch
SIRT UZUNLUK / BACKREST LENGTH	650 mm	25.59 Inch
OTURAK EN / SEAT WIDTH	610 mm	24.01 Inch
OTURAK UZUNLUK / SEAT LENGTH	620 mm	24.40 Inch
AYAK EN / FOOTREST WIDTH	610 mm	24.01 Inch
AYAK UZUNLUK / FOOTREST LENGTH	620 mm	24.40 Inch
KOLÇAK UZUNLUK / ARMREST LENGTH	590 mm	23.22 Inch
KOLÇAK EN / ARMREST WIDTH	200 mm	7.87 Inch
TEKER ÇAP / WHEEL DIAMETER	125 mm	4.92 Inch
SIRT AÇI / BACK ANGLE	70°	
AYAK AÇI / FOOT ANGLE	35°	
TRENDELENBURG / TRENDELENBURG	13°	
TERS TRENDELENBURG / REVERSE TRENDELENBURG	5°	
KAFALIK EN / HEADREST WIDTH	505 mm	19.88 Inch
KAFALIK UZUNLUK / HEADREST LENGTH	200 mm	7.87 Inch
KRAMP BASAMAĞI EN / CRAMP SUPPORT WIDTH	530 mm	20.86 Inch
KRAMP BASAMAĞI HAREKETİ / CRAMP SUPPORT MOVEMENT	300 mm	11.81 Inch
SÖNGER DANIŞTE / FOAM DENSITY	VISCO	
DÖŞME ÖZELLİK / UPHOLSTERY FEATURE	SUNİ DERİ / LEATHERETTE	
TAŞIMA KAPASİTESİ / MAX. SAFE LOAD CAPACITY	180 kg	395.83 Pound
ÜRÜN AĞIRLIK / PRODUCT WEIGHT	115 kg	253.53 Pound

Dialysis and Chemotherapy Chair

PANAMERA
DIALYSIS AND CHEMOTHERAPY CHAIR Designed By ARCHIMED



Arşimed Medikal Kozm. San. Tic Ltd. Şti.

Mimar Sinan Mah. Bosna Cd. No:5 / 3 Çekmeköy - İstanbul

☎ : +90 216 567 8 567 (pbx) 📠 : +90 216 567 8 367 (pbx)

🌐 : www.arsimed.com.tr ✉ : info@arsimed.com.tr



EN 60601-1

EN 60601-2



ISO13485
certified

ARCHIMED®
www.arsimed.com.tr